

Info: The most current version of these instructions can be found online at www.grahamfield.com.


- ⚠ **WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using your Lumex Drop Arm VersaMode. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the VersaMode is not properly adjusted, personal injury and damage to the VersaMode could result.**
- ⚠ **WARNING: If components are damaged or missing, contact your GF authorized distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the VersaMode.**
- ⚠ **WARNING: This product has a maximum weight capacity of 300 lb, EVENLY DISTRIBUTED.**
- ⚠ **WARNING: Notice for California Customers- California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.**
- ⚠ **WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.**

INTENDED USE

To provide transport, transfer, and commode functions with one device.

ASSEMBLY (SEE PICTURE AT RIGHT)

1. Carefully remove components from box.
 2. Install back and arm assembly on base and seat frame assembly by inserting back tubes into base frame tubes. If necessary loosen, but do not remove, knobs.
 3. Tighten knobs at rear seat until secure — do not overtighten.
 4. Install footrests on base frame footrest brackets. Lock footrests into place.
 5. Slide the commode pail in under the seat from the back.
- ⚠ **WARNING: Before use, ensure all components are securely installed and VersaMode is assembled as described above.**

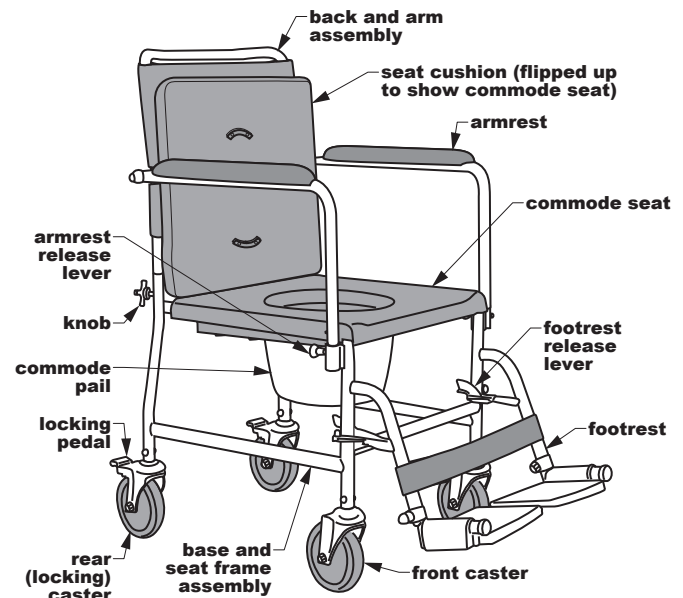

6810A Drop Arm VersaMode

OPERATION

Drop Armrests

The VersaMode armrests drop to facilitate transfer. To drop the armrest, pull the release lever outward until the armrest releases, lift the armrest up out of the socket, then swing it downward.

Lock Rear Casters

The rear casters lock into place to prevent movement. To lock, step on the rear pedal until it latches. To unlock, step on the rear pedal until it unlatches.

Swing Away / Remove Footrests

The VersaMode footrests swing away or detach to facilitate transfer. To swing the footrest away, depress the footrest release lever and swing it out of the way. To remove the footrest, swing it away, then lift it up off the brackets. To lock the footrest in place, swing it in toward the center of the VersaMode until it locks into place.

MAINTENANCE

Check the fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly.

⚠ **WARNING: Inspect the VersaMode weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF authorized distributor for repair and appropriate replacement parts.**

Cleaning

Clean the VersaMode with a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure the VersaMode is well-rinsed before use.

▲ **NOTICE: Never use solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the VersaMode.**

▲ **NOTICE: Always clean VersaMode as soon as possible after use. To contain odor until VersaMode can be cleaned, replace commode lid on commode pail immediately after use.**

LIMITED WARRANTY

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the "Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for three (3) years; seat/back, extension legs, and arms are warranted for six (6) months; and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not properly installed, used, or cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, including the most current version of these instructions, please visit our website at www.grahamfield.com.
Graham-Field and Lumex are registered trademarks, and VersaMode is a trademark, of GF Health Products, Inc.

© 2009 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Made in China

Info: La versión más reciente de estas instrucciones podrá ser encontrado en www.grahamfield.com.

- ⚠ **ADVERTENCIA: Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el VersaMode. Si no entiende cualquier parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, contacte a un profesional del cuidado médico para dirección en el uso de este producto. Asegúrese que el VersaMode esté ensamblado como descrito en los párrafos siguientes antes de uso. Si el VersaMode no está ensamblado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor autorizado de GF inmediatamente. No sustituya piezas.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad máximo de peso del usuario de 300 lb, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Aviso para los clientes de California - Proposición 65 de California**
ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California por causar cáncer y daños reproductivos o del desarrollo.
- ⚠ **ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o heridas causadas por ensamblaje incorrecto de este producto.**

USO PREVISTO

Para proporcionar transporte, transferencia, y funciones de cómoda con un único aparato.

ENSAMBLAJE (VÉASE LA ILUSTRACIÓN)

1. Quite cuidadosamente los componentes de la caja.
2. Instale el montaje de respaldo y asiento en el montaje de marco bajo y asiento insertando los tubes del respaldo en los tubes del baso. Si es necesario, afloje, pero no retire, las perillas
3. Apriete las perillas en el asiento trasero hasta que sean seguras — no las aprietan demasiado.
4. Instale los reposapiés en los soportes del marco bajo. Trabe los reposapiés en lugar.
5. Resbale el cubo de la cómoda adentro bajo asiento de la parte posterior.

- ⚠ **ADVERTENCIA: Antes de usar, asegúrese que todos los componentes estén bien sujetos y el VersaMode está ensamblado como descrito.**

OPERACIÓN

Dejar Caer los Apoyobrazos

Los apoyobrazos del VersaMode dejan caer para facilitar transferencia. Para caer los apoyobrazos, tire de la palanca hacia fuera hasta que los apoyobrazos desenganchan, levante los apoyobrazos para arriba del zócalo, y hágalos pivotar hacia abajo.

Trabarse de las Ruedas Traseras

Las ruedas traseras se traban en lugar para prevenir el movimiento. Para trabarse, caminar en el pedal posterior hasta que trabe. Para abrir, caminar en el pedal posterior hasta que abra.



6810A Drop Arm VersaMode

Hacer Pivotar / Separar los Reposapiés

Los reposapiés del VersaMode hacen pivotar lejos o separan para facilitar transferencia. Para hacer pivotar el reposapié lejos, presione la palanca y hágala pivotar apartada. Para quitar el reposapié, hágalo pivotar lejos, después levántelo para arriba de los soportes. Para trabar el reposapié en el lugar, hágalo pivotar adentro hacia el centro del VersaMode hasta que se trabe en lugar.

MANTENIMIENTO

Asegure que todos los tuercas, tornillo y tiradores están apretados semanalmente.

⚠ **ADVERTENCIA: Revise el VersaMode semanalmente para función propio y uso. Si algún componente no está trabajando correctamente o se parece usado, contacte a su distribuidor autorizado de GF para reparación y partes reemplazados apropiados.**

Limpiando

Limpie el VersaMode con una solución suave de jabón y agua, aclare con agua clara, entonces séquese con un paño suave. Asegúrese que el VersaMode esté aclarado bien antes de usar.

▲ **AVISO: NO DEBE usar los solventes, los polvos abrasivos, o los cojines de fregado en cualquier parte del VersaMode.**

▲ **AVISO: Limpie siempre el uso posterior del VersaMode cuanto antes. Para contener olor hasta que el VersaMode puede ser limpiado, sustituya la tapa de la cómoda en la cuba de la cómoda inmediatamente después del uso.**

GARANTÍA LIMITADA

La información de garantía siguiente es un SUMARIO de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera is el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto provído a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, el marco tiene garantía de tres (3) años; asiento / respaldo, las piernas de extensión y los brazos tienen garantía de seis (6) meses; y los componentes de uso normal, tales como puntas, ruedas y manijas, tienen garantía de tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debe llamar a GF directamente llamando 770-368-4700, mandando fax a 770-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre ni GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZDE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com.



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos. Para obtener la información más actualizada y vigente relativa a los envases, garantías, productos y especificaciones, incluyendo la versión más actualizada de estas instrucciones, por favor visite nuestro sitio web en www.grahamfield.com. Graham-Field y Lumex son marcas registradas, y VersaMode es una marca, de GF Health Products, Inc.

© 2009 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Fabricado en China